

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ

Особенности работы с ПО ДТмастер. 1 часть.

Установка и первичная настройка ПО ДТмастер.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	4
2	Особенности установки ПО ДТмастер на ПК с ПО RealTime_PCR версии 7.9.....	4
3	Особенности установки ПО ДТмастер на ПК с ПО RealTime__PCR версии 7.10.....	4
4	Установка ПО ДТмастер	5
5	Рекомендации по работе в ПО ДТмастер	10
6	КОНТАКТЫ	13

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

ОТП	- описание технологического процесса по применению набора реагентов
ПО	- программное обеспечение
ПК	- персональный компьютер

1 ВВЕДЕНИЕ

Настоящее ОТП описывает порядок работы при установке и первичной настройке ПО ДТмастер.

Скачать ПО ДТмастер можно на официальном сайте компании «ДНК-Технология» в разделе «Поддержка». ПО расположено во вкладке «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ», строка «Скачать ПО DTmaster для амплификаторов детектирующих серии ДТ, распространяется бесплатно».

ВНИМАНИЕ!



- ПО ДТмастер совместимо **только** с ОС Windows 10 (и выше).
- ПО ДТмастер рекомендуется использовать только с приборами не ранее 2018 года выпуска, либо с приборами, выпущенным ранее и предварительно прошедшим техническое обслуживание. Заводские экспозиции должны составлять 1000 по всем каналам для амплификатора ДТпрайм и 500 по всем каналам для амплификатора ДТлайт.
- Для ПО ДТмастер не подходят файлы модулей анализа, разработанные для ПО RealTime_PCR версии 7.9!

Подробнее о работе в ПО ДТмастер см. Руководство пользователя к ПО.

2 Особенности установки ПО ДТмастер на ПК с ПО RealTime_PCR версии 7.9

Если на ПК установлено ПО RealTime_PCR версии 7.9, то для корректной совместной работы необходимо обновить ПО RealTime_PCR до сборки не ниже 5.48.

Актуальная сборка ПО RealTime_PCR расположена на официальном сайте компании «ДНК-Технология» в разделе «Поддержка». Во вкладке «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ», строка «Скачать ПО RealTime PCR для амплификаторов детектирующих серии ДТ (версия 7.9.5.XX), распространяется бесплатно».

Если вы работаете с ПО RealTime_PCR версии 7.9 с использованием дополнительного ПО, предоставленного другими производителями наборов реагентов для ПЦР, вам стоит перед обновлением ПО RealTime_PCR связаться с представителем сторонней компании и согласовать обновление ПО.

3 Особенности установки ПО ДТмастер на ПК с ПО RealTime_PCR версии 7.10

Если на ПК установлено ПО RealTime_PCR версии 7.10:


1. Установите ПО ДТмастер.
2. После установки ПО ДТмастер обязательно удалите с ПК ПО RealTime_PCR версии 7.10




ВНИМАНИЕ! Если Вы работаете в ПО **RealTime_PCR** версии 7.10 с тестами Энтерофлор.Дети или HCV/HCV Количественный, то перед установкой ПО ДТмастер обратитесь в Службу клиентской поддержки.

4 Установка ПО ДТмастер

- 4.1 Запустите установку нажатием левой кнопки мыши по файлу установщика .exe. Для установки могут понадобиться права администратора ПК.
- 4.2 Выберите язык установки. Нажмите [ОК].

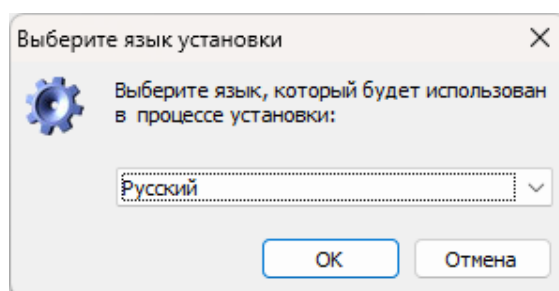


- 4.3 Если производится установка поверх ПО **RealTime_PCR** версии 7.10, отобразится окно с предупреждением. Нажмите [Да] для копирования списка пользователей/тестов.

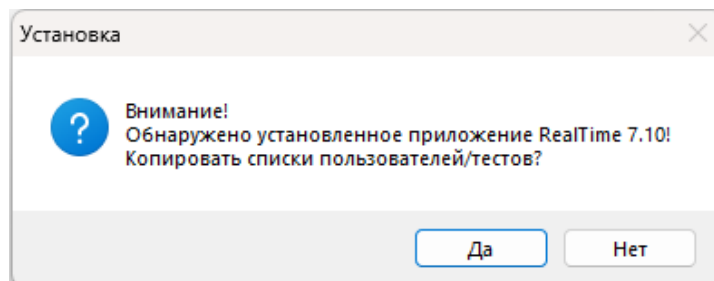


В случае согласия на копирование, все тесты из ПО **RealTime_PCR** версии 7.10 будут скопированы в ПО ДТмастер. После установки ПО ДТмастер, ПО **RealTime_PCR** версии 7.10 станет неактивно.


- 4.4 На экране отобразится окно мастера установки ДТмастер. Для перехода к следующему шагу установки используйте кнопку [Далее].

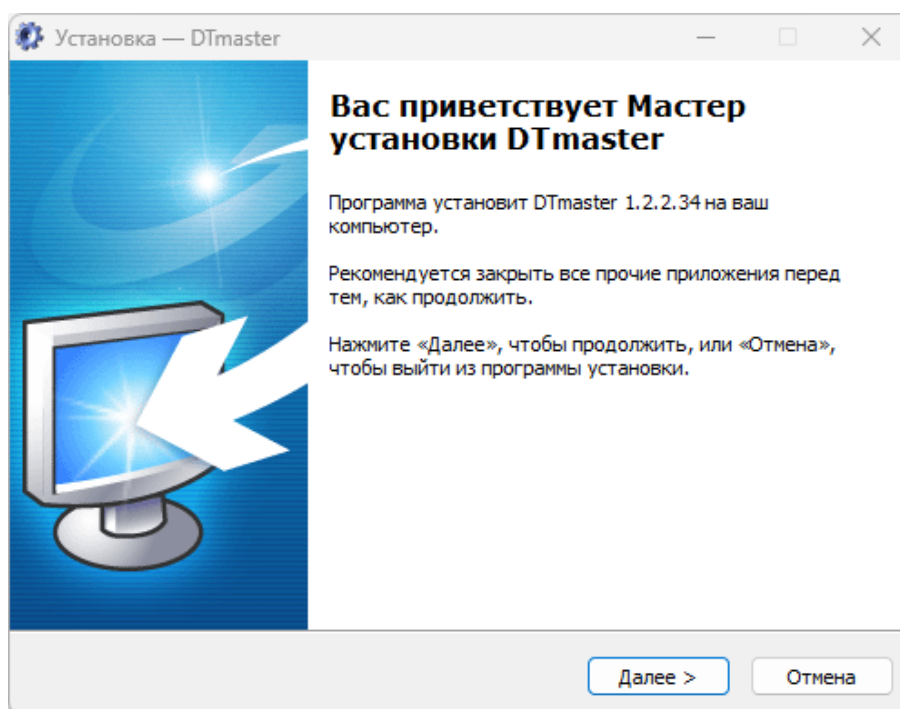


4.5 Выберите папку установки. Нажмите **[Далее]**.

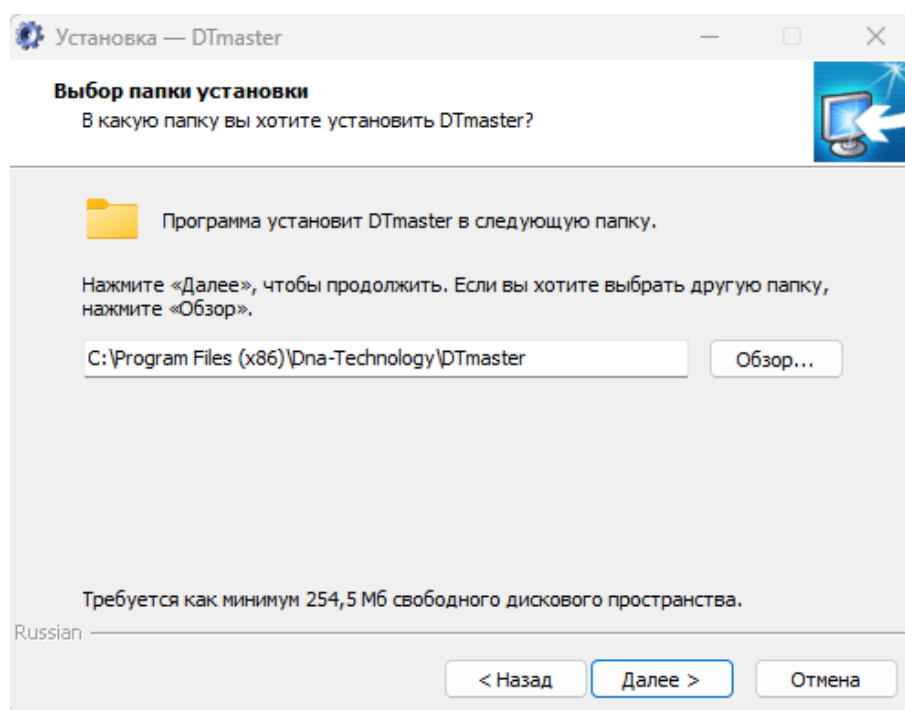


4.6 Выберите папку в меню «Пуск». Нажмите **[Далее]**.

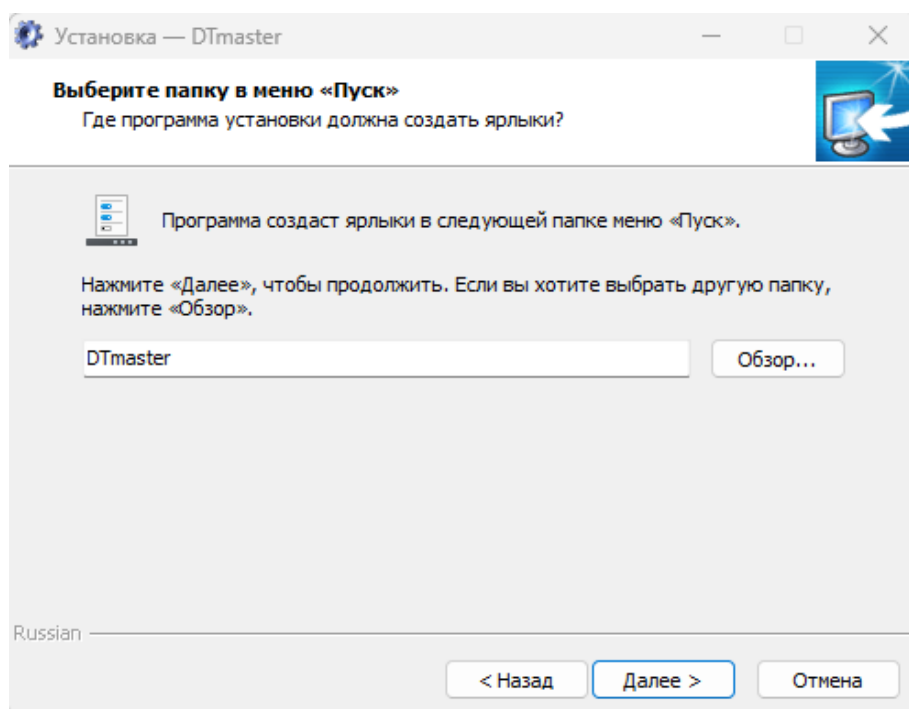

4.7 Нажмите [**Установить**].

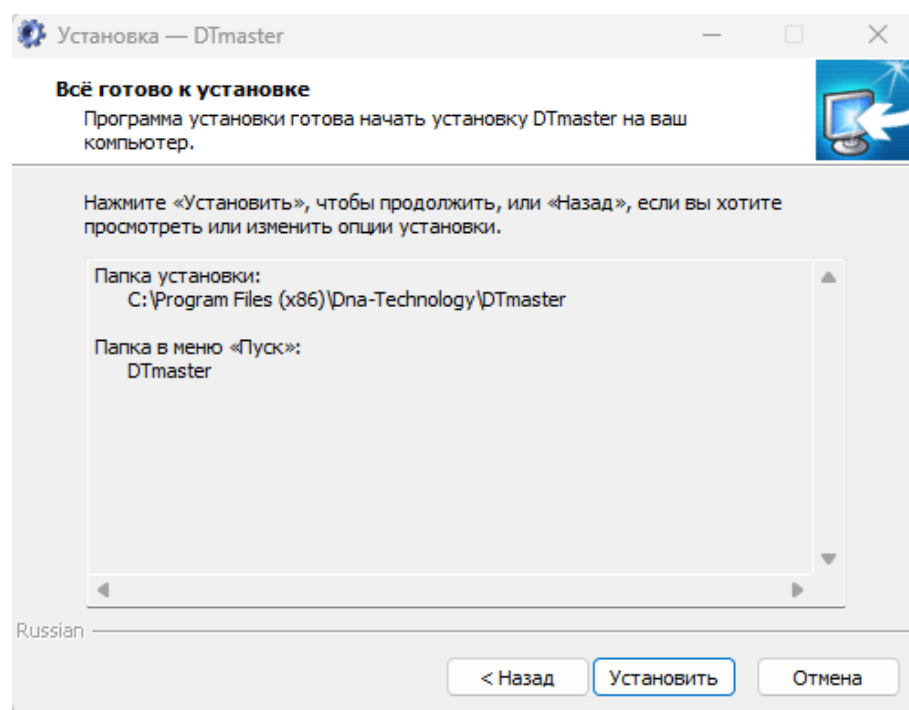

4.8 По завершении процесса установки в окне мастера отобразится соответствующее сообщение. Нажмите кнопку [**Завершить**] для выхода из мастера установки.

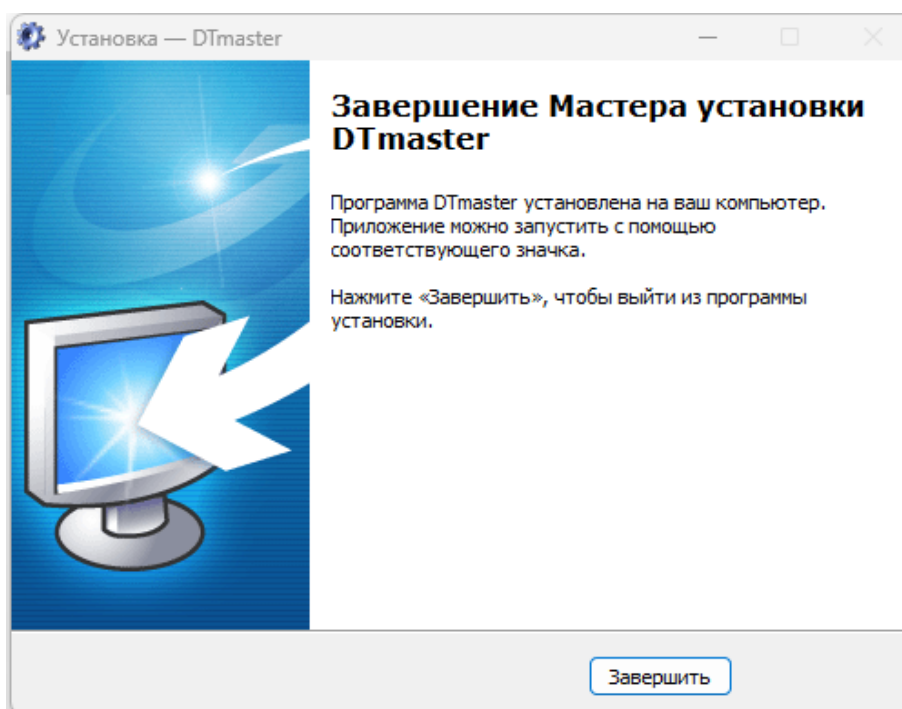

- 4.9 При входе в программу используйте предустановленный пароль 123 для оператора admin1. Пароль может быть изменен или отключен (подробнее см. п. 5.2)



ВНИМАНИЕ! После установки ПО ДТмастер поверх ПО RealTime__PCR версии 7.10 **обязательно** проведите удаление с ПК ПО RealTime__PCR версии 7.10. Для проведения деинсталляции пользователь должен обладать правами администратора.


Деинсталляция ПО RealTime__PCR версии 7.10

- 4.10 Перед деинсталляцией необходимо закрыть все окна ПО RealTime__PCR 7.10.
- 4.11 Вначале необходимо прекратить работу Server_USBdev в системном трее (области уведомлений).


Для этого в правом нижнем углу необходимо кликнуть по нему левой кнопкой мышки.



В открывшемся меню необходимо кликнуть правой кнопкой мышки по пиктограмме USB и выбрать опцию «Exit»

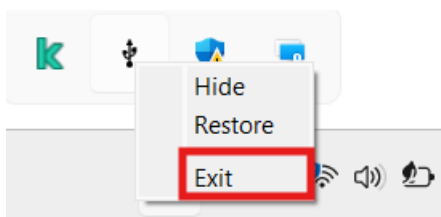

В появившемся диалоговом окне «Server_USBdev» нажмите [ОК].

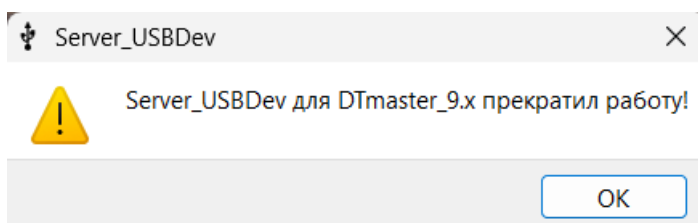

- 4.12 Далее нажмите правой кнопкой мыши по ярлыку  на рабочем столе и выберите «Расположение файла» или перейдите через «Мой компьютер» в папку:

C:\Program Files (x86)\Dna-Technology\RealTime__PCR

- 4.13 Запустите деинсталляцию путём клика по файлу «unins000.exe».


 unins000.dat	13.08.2025 8:19	Файл "DAT"	21 КБ
 unins000.exe	13.08.2025 8:19	Приложение	1 167 КБ
 wait.exe	09.02.2022 10:13	Приложение	607 КБ

- 4.14 После завершения деинсталляции удалите папку RealTime__PCR с остаточными файлами.


5 Рекомендации по работе в ПО ДТмастер

5.1 Настройка директории сохранения протоколов


5.1.1 В режиме «Протокол» перейдите в Настройки – Авторизация – Редактировать свойства пользователя.

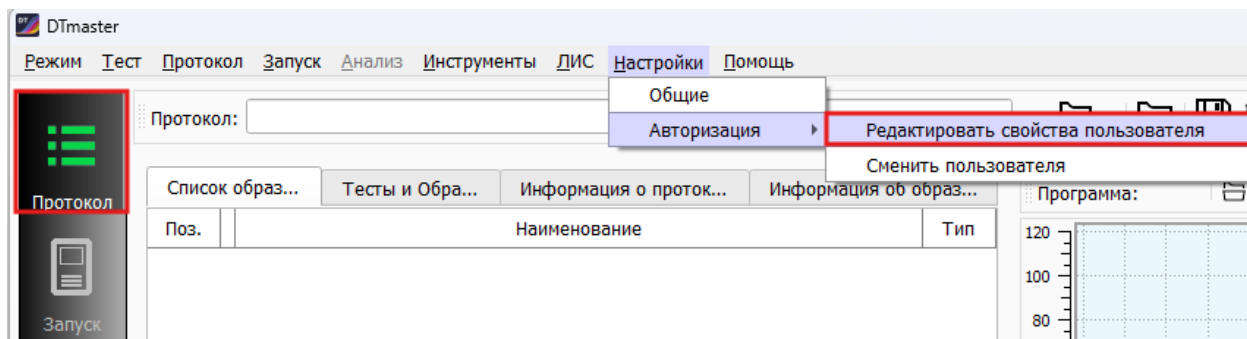

5.1.2 В окне «Авторизация» во вкладке «Разрешения» установите флаг выбора напротив п. **«Выбрать каталог для результатов»**. Тогда при запуске протокола будет предлагаться настройка имени и выбор места (каталога) его сохранения. Для сохранения настроек нажмите [Применить].

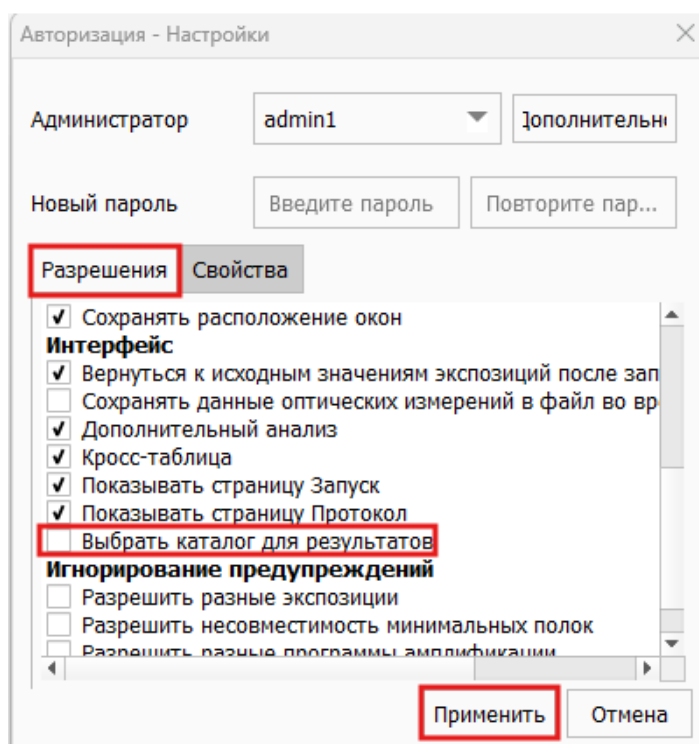


5.1.3 Основной каталог для сохранения протоколов можно настроить во вкладке «Свойства». Для этого кликните на строку **«Домашний каталог пользователя»** и в открывшемся окне Проводника выберите необходимую папку. Нажмите [Применить].

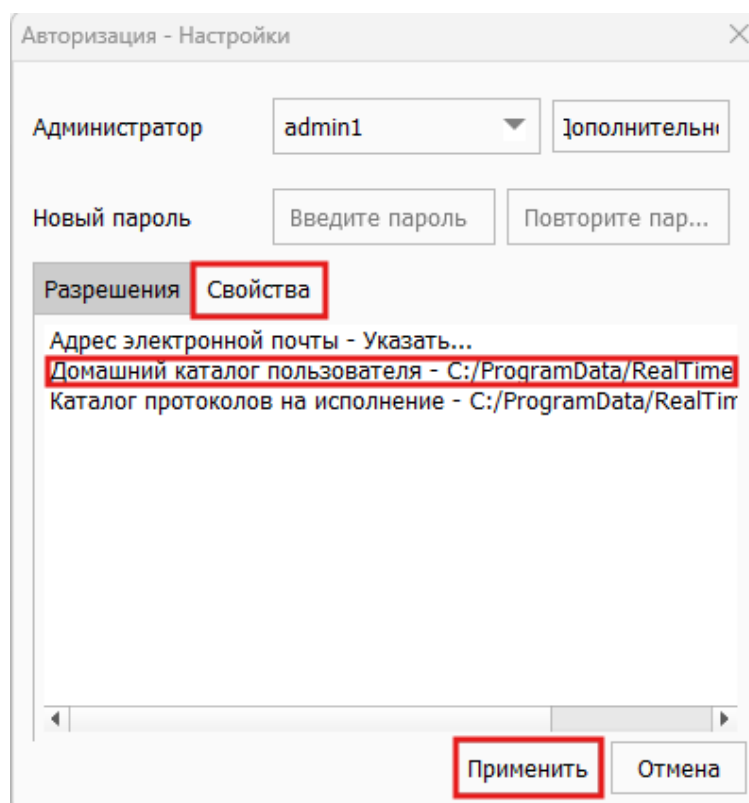


5.2 Настройка учётной записи, пароля и разрешений пользователя

- 5.2.1 Если работа в лаборатории осуществляется с разных учётных записей пользователя, то необходимо предварительно создать новые учётные записи и настроить разрешения к каждой из них. Создание новой учётной записи пользователя и настройка разрешений описана в Руководстве пользователя к ПО.
- 5.2.2 Если работа в лаборатории осуществляется с одной учётной записи пользователя, то для удобства рекомендуется настроить пользовательский вход без пароля.

Для отключения пароля в режиме «Протокол» перейдите в Настройки – Авторизация – Редактировать свойства пользователя.

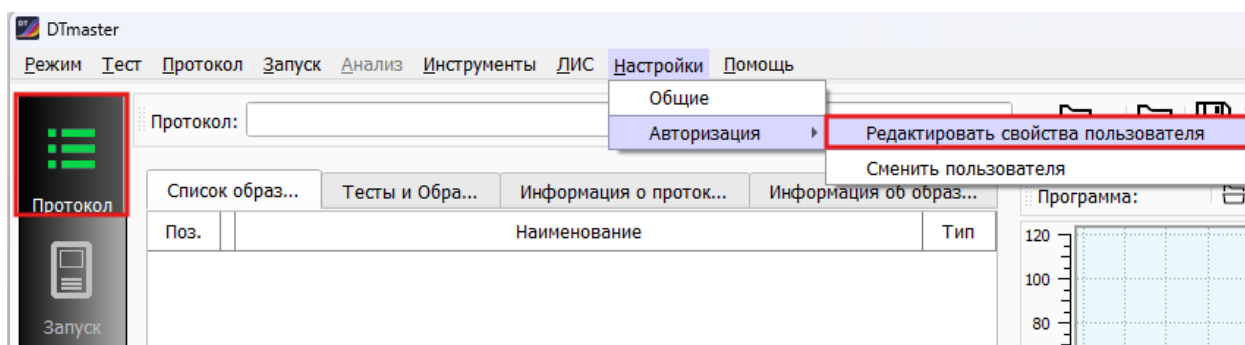

В окне «Авторизация» во вкладке «Разрешения» установите флаг выбора напротив п. «**Пользовательский вход без пароля**». Нажмите [Применить]. Настройки будут сохранены.

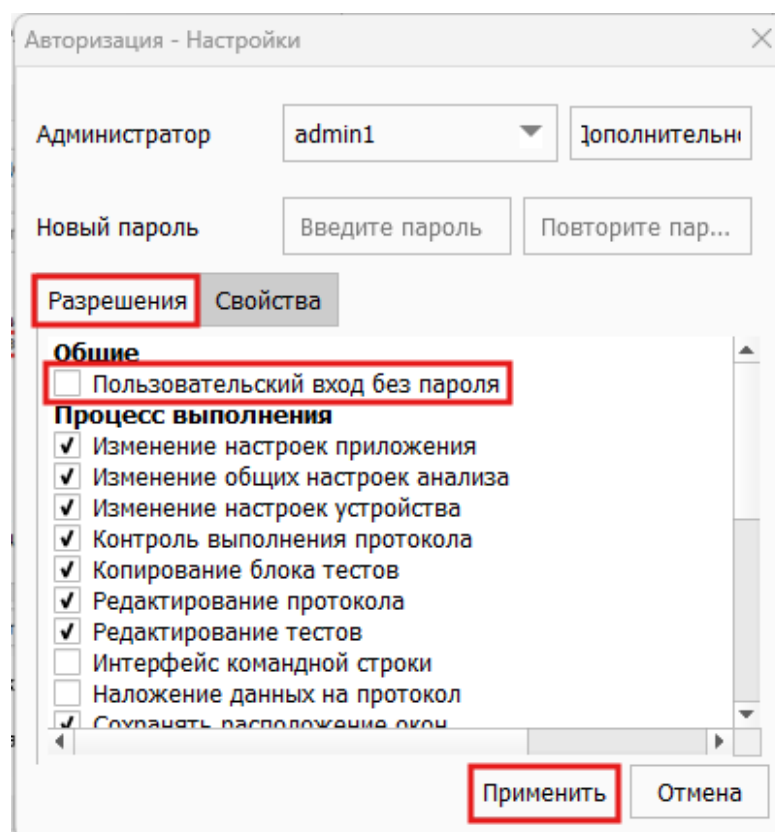

5.3 Настройка обменных папок и экспорта/импорта в ЛИС

ОТП по проведению настройки предоставляется по запросу в Службу клиентской поддержки.

6 КОНТАКТЫ

По вопросам, касающимся работы с ПО ДТмастер, следует обращаться в Службу клиентской поддержки.

Служба клиентской поддержки:

8-800-200-75-15 (для России, звонок бесплатный)

+7 (495) 640-16-93 (для стран СНГ и зарубежья, звонок платный).

E-mail: hotline@dna-technology.ru, www.dna-technology.ru

При обращении в Службу клиентской поддержки указывайте, пожалуйста:

- город, название организации;
- номер версии ПО ДТмастер;
- подробное описание вопроса/проблемы, включающее: описание ошибки (текст или изображение) и описание действия / последовательности действий, при которых возникла ошибка.